


**Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005
Руководство по эксплуатации ГИКС.942849.107РЭ**

Назначение: Укладка-пенал предназначена для хранения таблеток в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

**Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала**

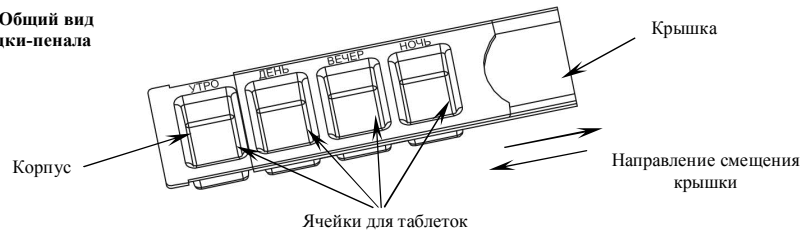

Комплект поставки:

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Конверт - 1 шт.

Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала не более: 160x64x19 мм.
Масса не более 50 гр.
Средний срок службы укладки-пенала не менее 2 лет. Критерием предельного состояния укладки-пенала является наличие на поверхности ее частей трещин, раковин, вздутий, расслоений.

Укладка-пенал применяется в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С;
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 °С, не более 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).


Правила эксплуатации укладки-пенала

К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.

**Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005
Руководство по эксплуатации ГИКС.942849.107РЭ**

Назначение: Укладка-пенал предназначена для хранения таблеток в лечебно-профилактических учреждениях и домашних условиях.

**Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала**

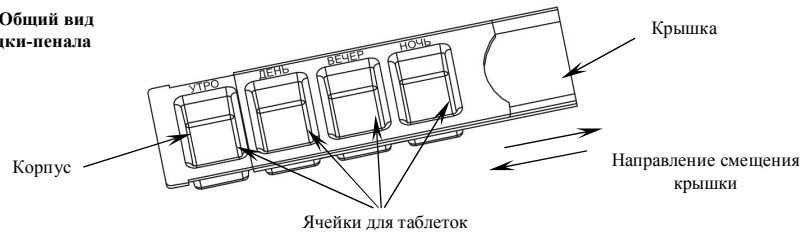

Комплект поставки:

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Конверт - 1 шт.

Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала не более: 160x64x19 мм.
Масса не более 50 гр.
Средний срок службы укладки-пенала не менее 2 лет. Критерием предельного состояния укладки-пенала является наличие на поверхности ее частей трещин, раковин, вздутий, расслоений.

Укладка-пенал применяется в следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С;
- влажность окружающего воздуха, при температуре плюс 25 °С, не более 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (630 – 800 мм рт. ст.).

Правила эксплуатации укладки-пенала

• К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.

- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более (75^{±2}) °С.
- При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ 9398-031-00203306.
- При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом.
- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Транспортирование и хранение

Укладка-пенал при транспортировании устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5, при хранении - для условий хранения 2.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание укладки-пенала сводится к ее профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений ее составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация

Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г.



ОМ № 23.92.09

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com

- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов. Максимально допустимая температура воздействия на укладку-пенал не более (75^{±2}) °С.
- При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал. Наружные и внутренние поверхности изделия устойчивы к дезинфекции химическим методом по МУ-287-113: 4% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 и 3% раствором хлорамина по ТУ 9398-031-00203306.
- При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом.
- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Транспортирование и хранение

Укладка-пенал при транспортировании устойчива к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5, при хранении - для условий хранения 2.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание укладки-пенала сводится к ее профилактическому осмотру в части контроля механических повреждений ее составных частей, удалению загрязнений. В случае обнаружения дефектов, приводящих к снижению эксплуатационных характеристик и безопасности, дефектные части заменяются на новые, приобретенные по отдельному заказу, и утилизируются (см. раздел Утилизация).

Утилизация

Изделие после его эксплуатации подлежит утилизации по правилам, предусмотренными в СанПиН 2.1.7.2790 для отходов класса «Б».

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящего руководства по эксплуатации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня продажи.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» по ТУ 9398-016-24320270-2005 изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____ Дата упаковки _____

Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/08847 от 23.11.2016г.



ОМ № 23.92.09

Изготовитель: АО «Елатомский приборный завод»

Адрес: Россия, 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25

Тел./факс (49131) 2-04-57

E-mail: admin@elamed.com

www.elamed.com